

Minze Diary Seat - Automatisch plasdagboek - patiëntenhandleiding



Minze Diary Seat - Automatisch plasdagboek - patiëntenhandleiding

Download on the
App Store




GET IT ON
Google Play



Download de Minze Flow app

Scan de QR-code om de Minze Flow app te downloaden vanuit de App Store of Google Play Store. De app begeleidt je stap voor stap bij het verbinden van de Minze Diary Seat met de App.

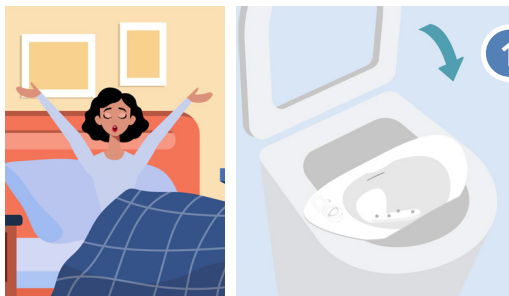


1

Start je plasdagboek met je ochtendplas

Begin je automatisch plasdagboek met je eerste plas na het opstaan, met de bedoeling om niet terug naar bed te gaan.


Zorg ervoor dat de Minze plashoed onder de toiletbril wordt geplaatst om je plas of zelfsondage te registreren.

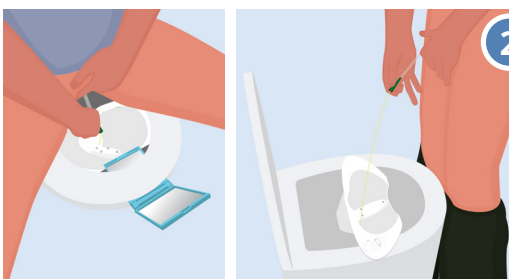

2

Plas of sondeer en vang de urine op

Plas of sondeer en laat de urine in de Minze plashoed lopen. Zoek een houding die voor jou het meest comfortabel is—je kan experimenteren met verschillende posities en de plashoed iets naar voren of achteren schuiven.

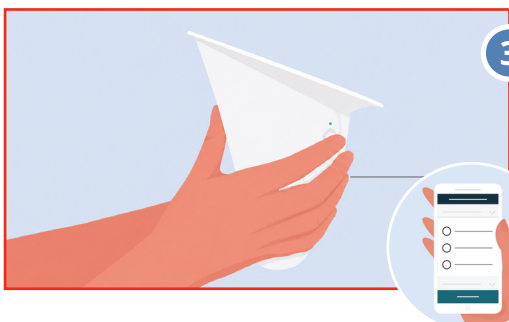

3

Registreer het volume - **BELANGRIJK!**


Haal na het plassen/sonderen de plashoed uit het toilet, houd hem vast en recht, en druk op de knop. Wacht tot je een dubbel knipperen ziet na een 5 tal seconden. Vul daarna de vragenlijst in die in de app verschijnt.

LED licht feedback

⚡ Zorg dat bluetooth op je telefoon aan staat.

● Kort aan: Actief
⚡ Knipperen: Plas registreren

● 2s Stabiël: Verwerken
⚡ 2x Dubbel knipperen: succesvol geregistreerd (en opgeslagen of geüpload)

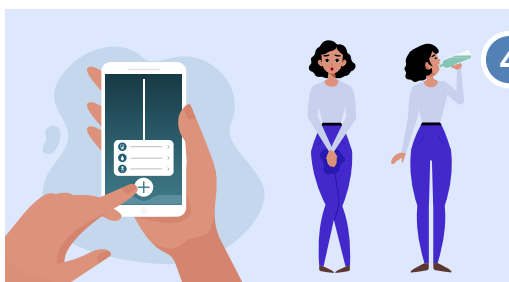

4

Registreer drankjes en urineverlies

Voeg drankjes en urineverlies toe door op de "+" knop in de app te drukken. Vul daarna de bijbehorende vragenlijst in.

Kon je een plas/zelfsondage niet registreren met de plashoed? Dan kan je deze ook manueel toevoegen via dezelfde "+" knop in de app.



5

Houd je plasdagboek 2 tot 3 dagen bij

Registreer alle plassen, drankjes en urineverlies gedurende 2 of 3 opeenvolgende dagen, zowel overdag als 's nachts. Een volledige dag in je plasdagboek begint met je eerste plas na het opstaan en eindigt pas de volgende dag, ook met je eerste plas na het opstaan. Vergeet die **ochtendplas op de volgende dag** zeker niet, want die geeft belangrijke informatie over je nachtelijke urineproductie.

VEELGESTELDE VRAGEN & PROBLEMEN

Automatisch plasdagboek



Leegmaken na gebruik

Giet de urine na de meting leeg in het toilet. **Laat geen urine of water** in de plashoed achter.



Reinigen

Spoel af met lauw water en eventueel een drupje afwasmiddel (milde zeep).

Laat de plashoed aan de lucht **drogen** of gebruik een schone, droge doek.

! De Diary Seat kan tot 1000 plasjes registreren voordat de batterij leeg is.

Bluetooth-verbinding



De plashoed heeft een geheugen en kan meerdere plassen opslaan. Zet **Bluetooth** aan om te uploaden, vooraf verbinden is dus niet nodig.



Open de app, controleer de **melding bovenaan** voor meer informatie.



Heb je nog steeds problemen? Sluit de app volledig af, zet **Bluetooth uit en aan en start de app opnieuw op**.

Het plasdagboek bijhouden in de app

Voor nauwkeurige berekeningen van de dagboekparameters is het belangrijk om telkens een van de **drie types plassen** correct te selecteren. Deze types zijn:



Ochtend: Dit verwijst naar de eerste plas na het opstaan met de bedoeling om niet terug naar bed te gaan.



Dag: Dit zijn alle plassen na je ochtendplas, gedurende de dag terwijl je wakker bent, totdat je naar bed gaat.



's Nachts: Dit zijn de plassen die 's nachts gebeuren terwijl je slaapt, en je wakker wordt om te plassen, maar daarna terug naar bed gaat.

Je kan plasdagboek-events tot 24 uur na registratie **bewerken of verwijderen** van je tijdlijn. Klik hiervoor op het event icoon in de tijdlijn.



Bewerk je antwoord door op de titel van de vraag te klikken en sla je bewerking op met de knop onderaan.

Verwijder events door op de rode "Verwijder" optie te klikken. Dit kan handig zijn als je alles eerst eens wilt testen.



CAUTION

Er zijn geen algemeen bekende omstandigheden in de thuisomgeving die de basisveiligheid en essentiële prestaties van het hulpmiddel op onaanvaardbare wijze kunnen beïnvloeden. Er moeten alleen voorzorgsmaatregelen worden genomen om beschadiging van het toestel te voorkomen:

- Om eendoeltreffend en veilig gebruik te bereiken, moet het Minze Diary worden gebruikt in overeenstemming met de in deze handleiding verstrekte informatie.
- Laat het toestel niet vallen of gooi er niet mee. Oefen er geen overdreven druk op uit of laat er geen andere voorwerpen op vallen. Dit kan het permanent beschadigen.
- Probeer nooit onderdelen te verwijderen van de Minze Diary door er aan te trekken, ze los te schroeven of door gebruik te maken van scherp gereedschap.
- De prestaties van het product kunnen worden geschaad als het apparaat: zichtbare schade vertoont: niet voldoet aan het beoogde gebruik; is blootgesteld aan langdurige opslag onder ongunstige omstandigheden; is blootgesteld aan zware belastingen tijdens het vervoer; is behandeld door niet-gekwificeerd personeel.
- Als het apparaat zichtbare schade of veranderingen in de werking vertoont, stop dan met het gebruik ervan en neem contact op met uw arts of zorgverlener.
- Het hergebruik van een Minze Diary toestel voor een andere patiënt/gebruiker is niet toegestaan om het risico van kruisbesmetting te vermijden.
- Hou het Minze Diary en de verpakking buiten bereik van kinderen en laat kinderen het alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene. Dit om abnormale hantering door kinderen te voorkomen, die hun veiligheid in gevaar zou kunnen brengen en/of het systeem zou kunnen beschadigen: bijvoorbeeld om het gevaar van verstikking (verpakking) en het inslikken van kleine onderdelen in geval van verkeerd gebruik (losschroeven van onderdelen, gebroken onderdelen,...) te voorkomen.
- Hou de Minze Diary buiten bereik van huisdieren, ongedierte en andere dieren om schade aan het systeem te voorkomen.
- In het zeer zeldzame geval van een allergische reactie tijdens het gebruik van het Minze Diary, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik en contact opnemen met uw arts of zorgverlener.
- Druk de houder niet te hard tegen de huid om een zeer zeldzame kans op letsel te voorkomen.
- Probeer nooit zelf de batterijen op te laden of te vervangen, en probeer nooit zelf de Minze Diary te repareren of aan te passen. Dit is om het gevaar van het inslikken van de batterij te vermijden.
- De Minze Diary wordt beschouwd als elektronisch afval (e-afval). Recycleer altijd volgens lokale regels. Het niet correct wegwerpen van e-afval kan een gevaar voor het milieu inhouden.
- De Minze Diary voldoet aan de nationale en internationale normen die van toepassing zijn op elektromagnetische storingen. Als voorzorgsmaatregel om storingsproblemen te voorkomen, maak geen overdreven gebruik van uw smartphone/tablet (bellen, downloaden, surfen, streamen, spelletjes spelen, ...) gedurende het registreren van een plas met de Minze Diary. Hoewel er geen storingsproblemen (door bronnen van buitenaf) verwacht worden, vermijd je best buitensporig gebruik van warmtebronnen in de buurt van het toestel.
- Gebruik alleen de Minze Flow app om een Bluetooth-verbinding met de Minze Diary tot stand te brengen. Probeer geen verbinding te maken met andere apparatuur of andere mobiele toepassingen.
- De de smartphone/tablet die verbonden worden met de Minze Diary moeten voldoen aan de laatste versie van één van volgende standaarden: IEC 60950, EN 60950 of UL 60950.
- Om waterschade aan het systeem/de elektronica te voorkomen: dompel de Minze Diary nooit enkele minuten onder in water of andere vloeistoffen; en gebruik nooit buitensporige hoeveelheden water om het apparaat te reinigen.
- Gebruik enkel enzymatisch detergent om het toestel schoon te maken. Gebruik nooit andere chemicaliën of technieken om schade aan het systeem te voorkomen.
- Gebruik enkel alcohol 70%-90% om het apparaat handmatig te desinfecteren. Gebruik nooit andere chemicaliën dan alcohol of andere technieken dan handmatig desinfecteren (bv. hoge temperatuur) om schade aan het systeem te voorkomen.
- Berg de Minze Diary op in een droge, stofvrije en schone omgeving tussen gebruik.
- De Minze Diary mag enkel binnenshuis gebruikt en bewaard worden bij temperaturen van +5°C tot +40°C (+41°F tot +104°F), een luchtvochtigheid van 15% tot 90% (niet-condenserend) en een atmosferische druk van 70 kPa tot 106 kPa. Indien de omgevingsomstandigheden tijdens het vervoer of de opslag buiten de gespecificeerde limieten vielen, **laat het toestel dan gedurende ten minste 15 minuten vóór gebruik aan de omstandigheden wennen.**

Hebt u ondersteuning nodig, een bug gevonden, een suggestie ter verbetering of een probleem met het product? Bezoek het Minze Help Center of neem contact op met Minze Health of een vertegenwoordiger voor hulp. De laatste details vindt u op www.minzehealth.com (helppagina).@



eIFU
indicator

Voor de volledige
gebruiksaanwijzing ga naar:
e-ifu.minzehealth.com



Minze N.V.
Lange Gasthuisstraat 29, bus 15
2000 Antwerpen, Belgium



